



HOOF BOOT

WITH COLD CAPSULE® TECHNOLOGY



Thoroughly read the following information prior to application.
Product function requires proper application.

Instructions for freezing your reusable Cold Capsule® Inserts:

1. Place the Cold Capsule® inserts in the freezer with the round seal facing up. Try to keep uncovered so they can “breathe”. The formula will crystalize and become fluffy.
2. The initial freeze should be 6 hours or more. Refreezing after use will take 3-4 hours.
3. Remove the inserts from the freezer and gently massage to loosen snow crystals as shown in Fig. 1.
4. Cold Capsule® Inserts may be wiped clean with a damp cloth after use.
5. To refreeze, you can take the inserts out of the wraps saving freezer space, or place the entire wrap with the Cold Capsule® Inserts directly into your freezer.
6. If the inserts feel stiff, gently massage them or set out to thaw for a few minutes before using the wraps. When inserts become too chunky to conform to the horse's legs it's time to replace them.

IF HEAT IS CALLED FOR, USE **DEEP HEAT®** INSERTS
by ICE HORSE®

Application instructions for Hoof Boot

- Open up the boot and place the Cold Capsule® inserts on the inner pads of the boot as shown in Fig. 2.
- Lift the horse's hoof and place the boot on it. Note: The front of the boot has the Ice Horse® logo as shown in Fig. 3.
- Set the hoof down and wrap the inner pads with the inserts around the horse's hoof pressing then against the hoof as tightly as possible as shown in Fig. 4.
- Pull the rear flap around the heel and back of hoof/leg and fasten against the inner pad., stretching the wrap for a secure fit as shown in Fig. 5.
- Pull the front wrap around the hoof stretching the wrap for a secure fit, and fasten to the rear wrap. Note: the inner pads and entire wrap is compatible with the Velcro® for ease in in adjustment and secure fit as shown in Fig. 6.
- Apply the cold therapy treatment for 30 minutes 2 hours depending on condition or recommendation veterinarian.

WHEN USING ICE HORSE® PRODUCTS, WE RECOMMEND YOUR HORSE IS SECURELY TIED AND NOT LEFT UNATTENDED.

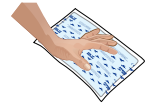


Fig. 1

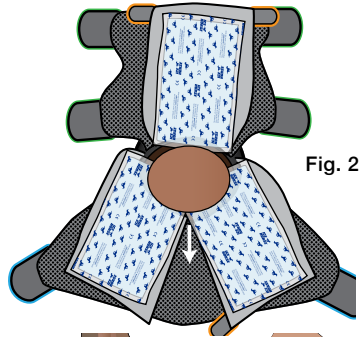


Fig. 2

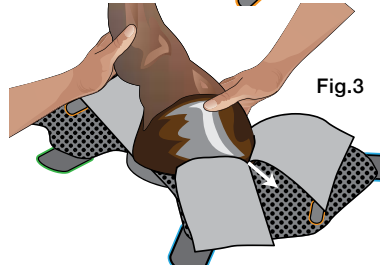


Fig. 3

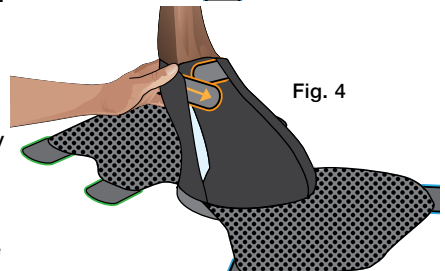


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Lea cuidadosamente la siguiente información antes de usarlo.
Para que el producto funcione correctamente se requiere aplicarlo adecuadamente.

Instrucciones para congelar sus insertos Cold Capsule® reutilizables:

1. Coloque los insertos Cold Capsule® en el congelador con el sello redondo hacia arriba. Trate de mantenerse al descubierto para que puedan "respirar". La fórmula se cristalizará y se volverá esponjosa.
2. La congelación inicial debe ser de 6 horas o más. Volver a congelar después de su uso llevará de 3 a 4 horas.
3. Retire los insertos del congelador y masajee suavemente para aflojar los cristales de nieve como se muestra en la Fig.1.
4. Los insertos Cold Capsule® se pueden limpiar con un paño húmedo después de su uso.
5. Para volver a congelar, puede sacar los insertos de las envolturas para ahorrar espacio en el congelador, o colocar la envoltura completa con las inserciones Cold Capsule® directamente en su congelador.
6. Si las inserciones se sienten rígidas, masajee suavemente o comience a descongelar durante unos minutos antes de usar las envolturas. Cuando los insertos se vuelven demasiado rígidos para adaptarse a las patas del caballo, es hora de reemplazarlos.

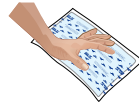


Fig. 1

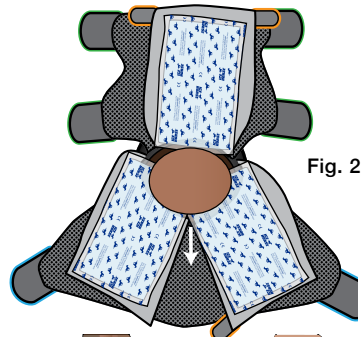


Fig. 2

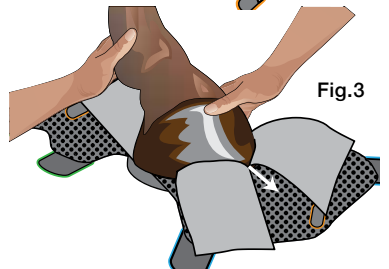


Fig.3

SI SE REQUIERE CALOR, USE **DEEP HEAT® DE ICE HORSE®**

Instrucciones para el abrigo:

- Abra la bota y coloque las inserciones Cold Capsule® en las almohadillas internas de la bota como se muestra en la Fig.2.
- Levanta el casco del caballo y coloca la bota sobre él. Nota La parte delantera de la bota tiene el logotipo de Ice Horse® (Fig. 3).
- Colocahacia abajo y envuelve las almohadillas internas con las inserciones alrededor de la pezuña del caballo presionando entonces contra la pezuña más firmemente posible como se muestra en la Fig. 4.
- Tire de la solapa trasera alrededor del talón y la parte posterior de la pezuña / pierna y fijela contra la almohadilla interior, estirando la envoltura para un ajuste seguro como se muestra en la Fig.5.
- Tire de la envoltura delantera alrededor de la pezuña estirando la envoltura para un ajuste seguro, y fijela a la envoltura trasera. Tenga en cuenta que las almohadillas internas y la envoltura completa son compatibles con el Velcro® para facilitar el ajuste y el ajuste seguro como se muestra en la Fig. 6.
- Aplique la terapia de frío durante 30 minutos a 2 horas, según la afección que se esté tratando o la recomendación del veterinario.

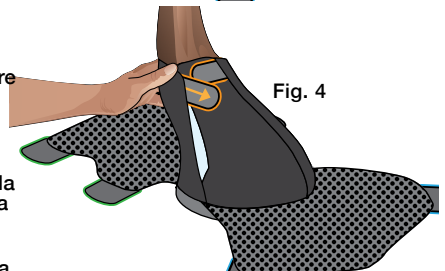


Fig. 4

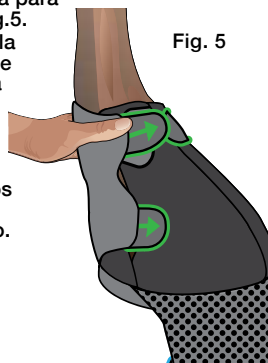


Fig. 5

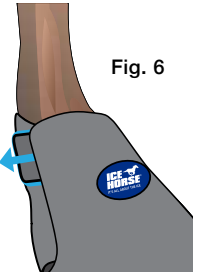


Fig. 6

CUANDO USE PRODUCTOS ICE HORSE®, LE RECOMENDAMOS QUE SU CABALLO ESTÉ BIEN ATADO Y NO DEJA DESATENDIDO.

Lire intégralement les informations suivantes avant toute application.
Le bon fonctionnement de ce produit requiert une mise en place correcte.

Instructions pour congeler vos inserts réutilisables Cold Capsule®:

1. Placez les inserts Cold Capsule® dans le congélateur avec le joint rond vers le haut. Essayez de garder à découvert pour qu'ils puissent "respirer". La formule cristallisera et deviendra couette.
2. Le gel initial devrait être de 6 heures ou plus. Le regel après utilisation prendra de 3 à 4 heures.
3. Retirez les inserts du congélateur et massez doucement pour détacher les cristaux de neige, comme illustré à la Fig.1.
4. Capsule froide® inserts peuvent être nettoyés avec un chiffon humide après utilisation.
5. Pour recongeler, vous pouvez retirer les inserts des emballages pour gagner de la place dans le congélateur, ou placer l'enveloppe entière des inserts Cold Capsule® directement dans votre congélateur.
6. Si les inserts sont raides, massez-les doucement ou décongelez pendant quelques minutes avant d'utiliser les enveloppements. Lorsque les inserts deviennent trop rigides pour épouser les pattes du cheval, il est temps de les remplacer.



Fig. 1

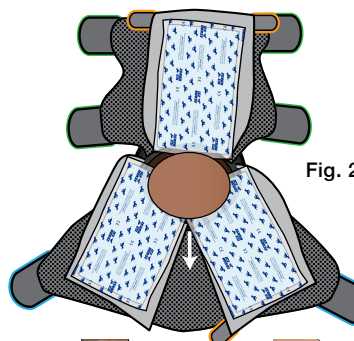


Fig. 2

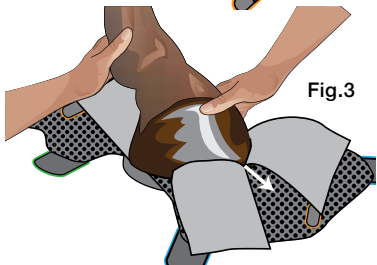


Fig.3

SI LA CHALEUR EST NÉCESSAIRE, UTILISEZ LA CHALEUR PRO FONDE® PAR ICE HORSE®

Instructions pour enveloppement:

- Ouvrez la botte et placez les inserts Cold Capsule® sur les coussinets intérieurs de la botte comme le montre la figure 2.
- Soulevez le sabot du cheval et placez la botte dessus. Remarque L'avant de la botte porte le logo Cheval de glace. (Fig. 3)
- Placez le sabot vers le bas et enrroulez les coussinets intérieurs avec les inserts autour du sabot du cheval en appuyant ensuite contre le sabot aussi étroitement que possible, comme illustré à la Fig.4.
- Tirez le rabat arrière autour de la guêrir et l'arrière du sabot / jambe et attachez contre le pad intérieur., étirant l'enveloppe pour un ajustement sécurisé comme indiqué dans fig. 5.
- Fixer les manchons intérieurs autour du sabot et fixer Tirez la bande avant autour du sabot en étirant la bande pour un ajustement sûr et fixez-la à la bande arrière. Notez que les coussinets intérieurs et l'ensemble de l'enveloppe sont compatibles avec le Velcro® pour faciliter l'ajustement et un ajustement sûr comme illustré à la Fig.6.
- Appliquez la thérapie par le froid pendant 30 minutes à 2 heures selon la condition à traiter ou la recommandation du vétérinaire.

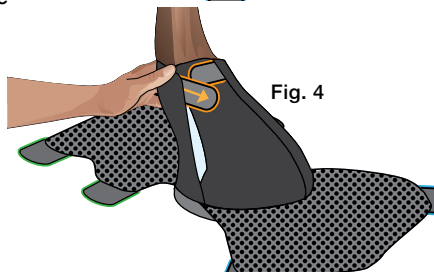


Fig. 4

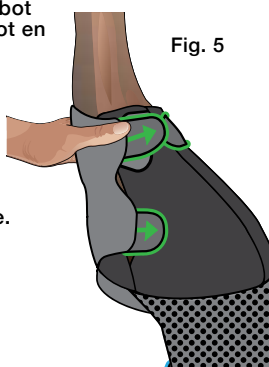


Fig. 5

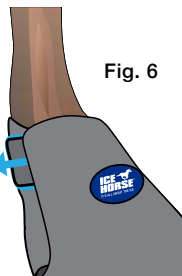


Fig. 6

LORSQUE VOUS UTILISEZ LES PRODUITS ICE HORSE®, NOUS RECOMMANDONS QUE VOTRE CHEVAL EST SOLIDEMENT AMARRÉ ET PAS LAISSÉ SANS SURVEILLANCE.

Gründlich lesen Sie die folgenden Informationen vor dem Auftrag.
Produkt-Funktion erfordert eine entsprechende Anwendung.

Anweisungen zum Einfrieren Ihrer wiederverwendbaren Cold Capsule® Einsätze:

1. Legen Sie die Cold Capsule® Einsätze mit der runden Dichtung nach oben in den Gefrierschrank. Versuchen Sie, unbedeckt zu bleiben, damit sie "atmen" können. Die Formel kristallisiert und wird flauschig.
2. Das anfängliche Einfrieren sollte 6 Stunden oder länger betragen. Das erneute Einfrieren nach Gebrauch dauert 3-4 Stunden.
3. Entfernen Sie die Einsätze aus dem Gefrierschrank und massieren Sie sanft, um Schneekristalle zu lösen, wie in Abb. 1 gezeigt.
4. Cold Capsule® Einsätze können nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
5. Zum erneuten Einfrieren können Sie die Einsätze aus dem herausnehmen Wraps sparen Platz im Gefrierschrank oder platzieren das gesamte Mit den Cold Capsule® Einsätzen direkt einwickeln in Ihren Gefrierschrank.
6. Wenn sich die Einsätze steif anfühlen, massieren Sie sie sanft oder tauen Sie sie einige Minuten lang auf, bevor Sie die Wraps verwenden. Wenn die Einsätze zu steif werden, um sich an die Beine des Pferdes anzupassen, ist es Zeit, sie auszutauschen.

WENN WÄRME GEFRAGT IST, VERWENDEN SIE DEEP HEAT® VON ICE HORSE®

Anweisungen Pferd-Stiefel:

- Öffnen Sie den Kofferraum und platzieren Sie die Cold Capsule® Einsätze an den Innenpolstern des Schuhs wie in gezeigt Abb. 2.
- Heben Sie den Huf des Pferdes an und legen Sie den Stiefel darauf. Hinweis Auf der Vorderseite des Schuhs befindet sich das Ice Horse® Logo (Abb. 3).
- Setzen Sie den Huf ab und wickeln Sie die inneren Polster so ein, dass die Einsätze um den Huf des Pferdes drücken und dann so fest wie möglich gegen den Huf drücken, wie in Abb. 4 gezeigt.
- Ziehen Sie die hintere Klappe um das Heil und die Rückseite des Hufs / Beins und befestigen Sie sie am inneren Polster. Dehnen Sie die Umhüllung, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten (siehe Abb. 5).
- Ziehen Sie den vorderen Wickel um den Huf und dehnen Sie ihn Für einen sicheren Sitz einwickeln und an der hinteren Umhüllung befestigen. Hinweis: Die inneren Pads und die gesamte Umhüllung sind kompatibel mit dem Klettverschluss für eine einfache Einstellung und Sicherer Sitz wie in Abb. 6 gezeigt.
- Wenden Sie die Kältetherapie je nach behandelter Erkrankung oder tierärztlicher Empfehlung 30 Minuten bis 2 Stunden lang an.

WENN ICE HORSE® PRODUKTE VERWENDEN,
EMPFEHLEN WIR, IHR PFERD SICHER
GEBUNDEN IST UND NICHT UNBEAUF SICHTIGT.



Fig. 1

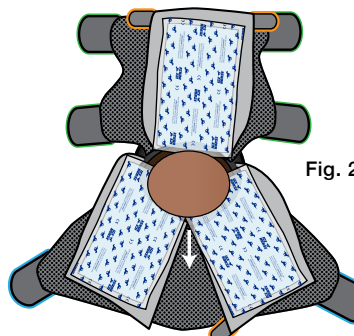


Fig. 2

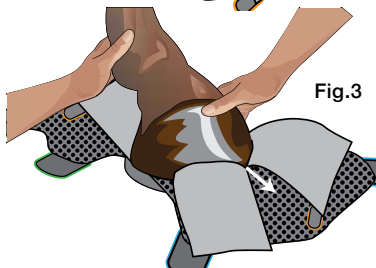


Fig. 3

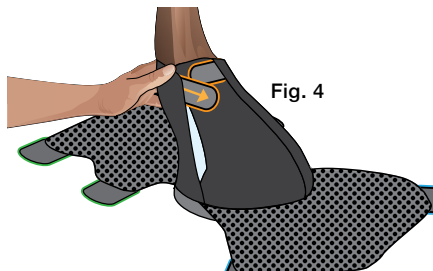


Fig. 4

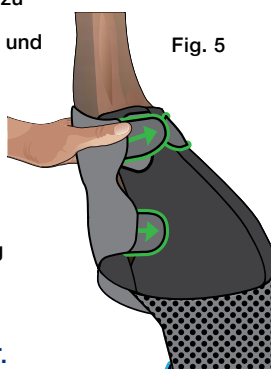


Fig. 5

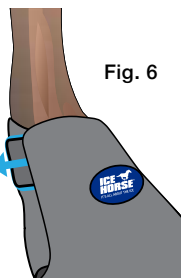


Fig. 6

WARNING: THIS PRODUCT IS ONLY TO BE USED AS DIRECTED. OBSERVE SKIN CONDITION DURING USE. IF REDNESS, PAIN OR SWELLING DEVELOPS, OR CHANGE IN SKIN SENSITIVITY OCCURS, DISCONTINUE USE AND CALL YOUR VETERINARIAN. BE AWARE THAT NERVE IRRITATION OR MUSCULAR REACTION MIGHT BE ASSOCIATED WITH INCREASED SKIN SENSITIVITY AND IRRITATION. DISCONTINUE THERAPY UNTIL THE EXACT CAUSE OF THE PROBLEM CAN BE DETERMINED.

CAUTION: Cold Capsule® Inserts should not burn the hair or hide of an animal but direct application of any non-coated cold / heat pack directly to human skin is not recommended. Acceptable and recommended application for human use is over a thin dressing. Cold Capsule® Inserts are made of a non-toxic formula and are not intended for internal use or consumption.

MANUFACTURER MAKES NO GUARANTEES THAT INJURY WILL BE PREVENTED USING THIS PRODUCT.

ADVERTENCIA ESTE PRODUCTO SOLO SE UTILIZA COMO SE INDICA. OBSERVE LA CONDICIÓN DE LA PIEL DURANTE EL USO. SI SE PRODUCE ENROJECIMIENTO, DOLOR O HINCHAZÓN, O CAMBIO EN LA SENSIBILIDAD DE LA PIEL, INTERRUMPA EL USO Y LLAME A SU VETERINARIO. TEN EN CUENTA QUE LA IRRITACIÓN NERVIOSA O LA REACCIÓN MUSCULAR PUEDEN ESTAR ASOCIADAS CON UN AUMENTO DE LA SENSIBILIDAD E IRRITACIÓN DE LA PIEL. INTERRUMPA EL TRATAMIENTO HASTA QUE SE PUEDA DETERMINAR LA CAUSA EXACTA DEL PROBLEMA. PRECAUCION.

PRECAUCIÓN Los insertos Cold Capsule® no deben quemar el pelo o la piel de un animal, pero no se recomienda la aplicación directa de cualquier paquete frío / calor sin recubrimiento directamente sobre la piel humana. La aplicación aceptable y recomendada para uso humano es sobre un apósito delgado. Los insertos Cold Capsule® están hechos de una fórmula no tóxica y no están diseñados para uso o consumo interno.

EL FABRICANTE NO GARANTIZA QUE SE EVITARÁN LESIONES AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.



CE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SELON LES DIRECTIVES. OBSERVEZ L'ÉTAT DE LA PEAU PENDANT L'UTILISATION. SI DES ROUGEURS, DE LA DOULEUR OU DE L'ENFLURE SE DÉVELOPPENT, OU SI UN CHANGEMENT DE SENSIBILITÉ CUTANÉE SE PRODUIT, CESEZ L'UTILISATION ET APPELEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE. SACHEZ QUE L'IRRITATION NERVEUSE OU LA RÉACTION MUSCULAIRE PEUT ÊTRE ASSOCIÉE À UNE SENSIBILITÉ ET UNE IRRITATION ACCRUES DE LA PEAU. INTERROMPRE LA THÉRAPIE JUSQU'À CE QUE LA CAUSE EXACTE DU PROBLÈME PUISSE ÊTRE DÉTERMINÉE.

ATTENTION Les inserts Cold Capsule® ne doivent pas brûler les poils ou la peau d'un animal, mais l'application directe de toute compresse froide / chaleur non enduite directement sur la peau humaine n'est pas recommandée. L'application acceptable et recommandée pour l'usage humain est sur un pansement fin. Les inserts Cold Capsule® sont fabriqués à partir d'une formule non toxique et ne sont pas destinés à un usage interne ou à la consommation.

LE FABRICANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUE DES BLESSURES SERONT ÉVITÉES EN UTILISANT CE PRODUIT.

WARNUNG DIESES PRODUKT DARF NUR DIREKT VERWENDET WERDEN. BEACHTEN SIE DEN HAUTZUSTAND WÄHREND DES GEBRAUCHS. WENN RÖTUNGEN, SCHMERZEN ODER SCHWELLUNGEN AUFTRETEN ODER SICH DIE HAUTEMPFINDLICHKEIT ÄNDERT, STELLEN SIE DIE VERWENDUNG EIN UND RUFEN SIE IHREN TIERARZT AN. BEACHTEN SIE, DASS NERVE-REIZUNG ODER MUSKULÄRE REAKTION MIT EINER ERHÖHTEN HAUTEMPFINDLICHKEIT UND REIZUNG VERBUNDEN KÖNNEN. SETZEN SIE DIE THERAPIE FORT, BIS DIE GENAUE URSACHE DES PROBLEMS FESTGESTELLT WERDEN KANN.

VORSICHT Cold Capsule® Einsätze sollten nicht die Haare oder die Haut eines Tieres verbrennen. Eine direkte Anwendung einer nicht beschichteten Kälte / Wärmepackung direkt auf die menschliche Haut wird jedoch nicht empfohlen. Akzeptable und empfohlene Anwendung für den menschlichen Gebrauch erfolgt über einem dünnen Verband. Cold Capsule® Einsätze bestehen aus einer ungiftigen Formel und sind nicht für den internen Gebrauch oder Verbrauch bestimmt.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE, DASS VERLETZUNGEN MIT DIESEM PRODUKT VERMEIDET WERDEN.





If You Like Us ... Let Us Know




we love seeing our
products in action

tag us on social media



IceHorseEquine

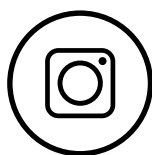

@Icehorse



IceHorseEquine



IceHorseNetwork

icehorse.com



800-786-6633