



# DEEP HEAT<sup>®</sup> BY ICE HORSE<sup>®</sup>

MADE IN  
  
THE USA



Thoroughly read the following information prior to application.  
Product function requires proper application.

**Always bring bag to room temperature before heating.**

#### MICROWAVE

1. After bringing to room temperature, lay bag facedown with seam up in microwave.
2. Heat at full power as shown: Single bag instructions.

WATTAGE	1000	800	600	UNSURE
HEATING TIME	35 seconds	45 seconds	60 seconds	35 seconds

3. Remove from microwave and knead bag for one minute to allow gel to heat evenly (temperature will continue to increase slightly).
4. Test for desired temperature. If too hot, allow to cool. If additional heat is desired, return to microwave and heat in 10 second cycles.
5. When desired temperature is achieved, place bag onto ICE HORSE® wrap with Velcro®, then apply to desired area.

#### HOT WATER

1. Bring bag to room temperature.
2. Bring at least 3 quarts of water to a rolling boil.
3. Remove water from heat source. Gently immerse bag for a maximum of 5 minutes.
4. Remove bag from water, place bag into ICE HORSE® wrap pocket, then apply to desired area.

**DISCARD IF PUNCTURED OR TORN ALWAYS PLACE IN WRAP SLEEVE, OR ATTACH TO WRAP WITH VELCRO® BEFORE APPLICATION.**

- Repeat this cycle as prescribed.
- Follow instructions from your veterinarian for best placement and duration.

**WHEN USING ICE HORSE® PRODUCTS, WE RECOMMEND YOUR HORSE IS SECURELY TIED AND NOT LEFT UNATTENDED.**



Lea cuidadosamente la siguiente información antes de usarlo. Para que el producto funcione correctamente se requiere aplicarlo adecuadamente.

**Siempre deja que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes del uso con calor.**

#### CALEFACCIÓN DE MICROONDA

1. Después de traer a la temperatura ambiente, poner la bolsa boca abajo con costura para arriba en microonda.
2. Incluir en los plenos poderes según lo mostrado: Solo Instrucciones Del Bolso.

VATIAJE	1000	800	600	DUDOSO
CALEFACCIÓN	35 segundos	45 segundos	60 segundos	35 segundos

3. Quite de microonda y amase durante un minuto para permita que el gel caliente uniformemente (la temperatura continuará aumentando levemente).
4. Pruebe para la temperatura deseada. Si esta demasiado es caliente, permita que el bolso se refresque. Si se desea calor adicional, vuelva la microonda y caliente en ciclos de 10 segundos.
5. Cuando se alcanza la temperatura deseada, colocar la bolsa en el bolsillo del abrigo ICE HORSE®, a continuación, aplicar sobre el área deseada.


#### LA CALEFACCIÓN DE AGUA CALIENTE

1. Traiga el bolso a la temperatura ambiente.
2. Traiga por lo menos 3 cuartos de galón (3 litros) de agua a hervir.
3. Quite el agua de fuente de calor. Sumerja suavemente el bolso en el agua para un máximo de 5 minutos.
4. Retire la bolsa del agua, coloque la bolsa en el bolsillo del abrigo de ICE HORSE®, luego aplique al área deseado.

**DESECHAR SI PERFORADO O ROTO COLOQUE SIEMPRE EN ABRIGO DE MANGA ANTES DE LA APLICACIÓN. NUNCA APLIQUE A PIEL DESNUDA**

- Repetir este ciclo según lo prescrito.
- Siga las instrucciones de su veterinario para la mejor colocación y duración.

**CUANDO USE PRODUCTOS ICE HORSE®, LE RECOMENDAMOS QUE SU CABALLO ESTÉ BIEN ATADO Y NO DEJA DESATENDIDO.**

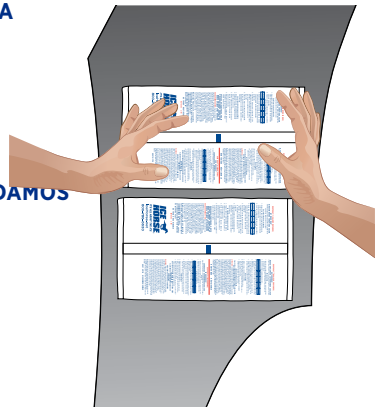

# Français **MODE D'EMPLOI POUR LA THERAPIE DE CHALEUR**

Lire intégralement les informations suivantes avant toute application.  
Le bon fonctionnement de ce produit requiert une mise en place correcte.

**Toujours s'assurer que le sac soit à température ambiante avant de chauffer.**

## MICRO-ONDES

1. Après l'avoir maintenu à température ambiante, coucher le sac dans le micro ondes de façon à ce que la face soit vers le bas et la couture vers le haut.
2. Chauffer à puissance maximale comme suit: Mode d'emploi pour sac unique.

PUISSANCE EN WATTS	1000	800	600	PAS SÛR
TEMPS DE CHAUFFAGE	35 secondes	45 secondes	60 secondes	35 secondes

3. Sortir le sac du micro-ondes et pétrir pendant une minute afin que le gel chauffe de façon uniforme (la température continuera à s'élever légèrement).
4. Tester la température. Si elle est trop élevée, laisser refroidir. Si vous estimez que la température est trop faible, remettre le sac au micro-ondes et chauffer à des intervalles de 10 secondes.
5. Quand la température désirée est atteinte, mettre le sac dans la pochette enveloppante ICE HORSE® et appliquer sur la zone voulue.

## EAU CHAUDE

1. Maintenir le sac à température ambiante.
2. Porter à ébullition au moins les trois quarts de l'eau.
3. Ôter l'eau de la source de chaleur. Immerger doucement le sac durant au maximum 5 minutes.
4. Ôter le sac de l'eau, le mettre dans la pochette enveloppante ICE HORSE® et appliquer sur la zone voulue.

**JETER SI PERFORÉ OU DECHIRÉ PLACEZ TOUJOURS EN MANCHES WRAP AVANT APPLICATION NE JAMAIS APPLIQUER SUR LA PEAU NUE.**

- Répétez ce cycle comme prescrit.
- Suivez les instructions de votre médecin vétérinaire pour le meilleur placement et la durée.

**LORSQUE VOUS UTILISEZ LES PRODUITS ICE HORSE®, NOUS RECOMMANDONS QUE VOTRE CHEVAL EST SOLIDEMENT AMARRÉ ET PAS LAISSÉ SANS SURVEILLANCE.**



Gründlich lesen Sie die folgenden Informationen vor dem Auftrag.  
Produkt-Funktion erfordert eine entsprechende Anwendung.

**Bringen Sie den Beutel immer auf Zimmertemperatur bevor Sie ihn erwärmen.**

#### MIKROWELLE

1. Nachdem der Beutel Zimmertemperatur erreicht hat, legen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten und dem Saum nach oben in die Mikrowelle.
2. Erwärmen Sie ihn bei voller Hitze wie angegeben: Einzelne BeutelAnweisungen.

WATT	1000	800	600	UNSICHER
DAUER	35 sekunden	45 sekunden	60 sekunden	35 sekunden

3. Nehmen Sie den Beutel aus der Mikrowelle und kneten Sie ihn für eine Minute, um das Gel gleichmäßig zu erwärmen (die Temperatur wird weiterhin geringfügig ansteigen).
4. Überprüfen Sie, ob die gewünschte Temperatur erreicht ist. Wenn der Beutel zu heiß ist, lassen Sie ihn abkühlen. Wenn er weiter erwärmt werden soll, legen Sie ihn wieder in die Mikrowelle und erwärmen Sie ihn in Intervallen von 10 Sekunden.
5. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, legen Sie den Beutel in die ICE HORSE® Hülle und platzieren sie ihn auf der gewünschten Stelle.

#### HEIßES WASSER

1. Bringen Sie den Beutel auf Zimmertemperatur.
2. Erwärmen Sie mindestens 3/4 Liter Wasser, bis es sprudelnd kocht.
3. Nehmen Sie das Wasser von der Wärmequelle. Legen Sie den Beutel vorsichtig für maximal 5 Minuten hinein.
4. Nehmen Sie den Beutel aus dem Wasser, legen Sie ihn in die ICE HORSE® Hülle und platzieren Sie ihn auf der gewünschten Stelle.

**BEUTEL ENTSORGEN WENN ER ZERSTOCHEN ODER EINGERISSEN IST PLATZIEREN SIE STETS IN WRAP HÜLSE VOR ANWENDUNG NIE DIREKT AUF DER HAUT ANWENDEN.**

- Wiederholen sie diesen zyklus, wie vorgeschrieben.
- Folgen sie den anweisungen von Ihrem tierarzt für die beste platzierung und dauer.

**WENN ICE HORSE® PRODUKTE VERWENDEN, EMPFEHLEN WIR, IHR PFERD SICHER GEBUNDEN IST UND NICHT UNBEAUFICHTIGT.**



---

**WARNING: THIS PRODUCT IS ONLY TO BE USED AS DIRECTED. OBSERVE SKIN CONDITION DURING USE. IF REDNESS, PAIN OR SWELLING DEVELOPS, OR CHANGE IN SKIN SENSITIVITY OCCURS, DISCONTINUE USE AND CALL YOUR VETERINARIAN. BE AWARE THAT NERVE IRRITATION OR MUSCULAR REACTION MIGHT BE ASSOCIATED WITH INCREASED SKIN SENSITIVITY AND IRRITATION. DISCONTINUE THERAPY UNTIL THE EXACT CAUSE OF THE PROBLEM CAN BE DETERMINED.**

---

CAUTION: Cold Capsule® Inserts should not burn the hair or hide of an animal but direct application of any non-coated cold / heat pack directly to human skin is not recommended. Acceptable and recommended application for human use is over a thin dressing. Cold Capsule® Inserts are made of a non-toxic formula and are not intended for internal use or consumption.

---

MANUFACTURER MAKES NO GUARANTEES THAT INJURY WILL BE PREVENTED USING THIS PRODUCT.

---

**ADVERTENCIA ESTE PRODUCTO SOLO SE UTILIZA COMO SE INDICA. OBSERVE LA CONDICIÓN DE LA PIEL DURANTE EL USO. SI SE PRODUCE ENROJECIMIENTO, DOLOR O HINCHAZÓN, O CAMBIO EN LA SENSIBILIDAD DE LA PIEL, INTERRUMPA EL USO Y LLAME A SU VETERINARIO. TEN EN CUENTA QUE LA IRRITACIÓN NERVIOSA O LA REACCIÓN MUSCULAR PUEDEN ESTAR ASOCIADAS CON UN AUMENTO DE LA SENSIBILIDAD E IRRITACIÓN DE LA PIEL. INTERRUMPA EL TRATAMIENTO HASTA QUE SE PUEDA DETERMINAR LA CAUSA EXACTA DEL PROBLEMA. PRECAUCIÓN.**

---

PRECAUCIÓN Los insertos Cold Capsule® no deben quemar el pelo o la piel de un animal, pero no se recomienda la aplicación directa de cualquier paquete frío / calor sin recubrimiento directamente sobre la piel humana. La aplicación aceptable y recomendada para uso humano es sobre un apósito delgado. Los insertos Cold Capsule® están hechos de una fórmula no tóxica y no están diseñados para uso o consumo interno.

---

EL FABRICANTE NO GARANTIZA QUE SE EVITARÁN LESIONES AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.



---

**CE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SELON LES DIRECTIVES. OBSERVEZ L'ÉTAT DE LA PEAU PENDANT L'UTILISATION. SI DES ROUGEURS, DE LA DOULEUR OU DE L'ENFLURE SE DÉVELOPPENT, OU SI UN CHANGEMENT DE SENSIBILITÉ CUTANÉE SE PRODUIT, CESEZ L'UTILISATION ET APPELEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE. SACHEZ QUE L'IRRITATION NERVEUSE OU LA RÉACTION MUSCULAIRE PEUT ÊTRE ASSOCIÉE À UNE SENSIBILITÉ ET UNE IRRITATION ACCRUES DE LA PEAU. INTERROMPRE LA THÉRAPIE JUSQU'À CE QUE LA CAUSE EXACTE DU PROBLÈME PUISSE ÊTRE DÉTERMINÉE.**

---

ATTENTION Les inserts Cold Capsule® ne doivent pas brûler les poils ou la peau d'un animal, mais l'application directe de toute compresse froide / chaleur non enduite directement sur la peau humaine n'est pas recommandée. L'application acceptable et recommandée pour l'usage humain est sur un pansement fin. Les inserts Cold Capsule® sont fabriqués à partir d'une formule non toxique et ne sont pas destinés à un usage interne ou à la consommation.

---

LE FABRICANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUE DES BLESSURES SERONT ÉVITÉES EN UTILISANT CE PRODUIT.

---

**WARNUNG DIESES PRODUKT DARF NUR DIREKT VERWENDET WERDEN. BEACHTEN SIE DEN HAUTZUSTAND WÄHREND DES GEBRAUCHS. WENN RÖTUNGEN, SCHMERZEN ODER SCHWELLUNGEN AUFTRETEN ODER SICH DIE HAUTEMPFFINDLICHKEIT ÄNDERT, STELLEN SIE DIE VERWENDUNG EIN UND RUFEN SIE IHREN TIERARZT AN. BEACHTEN SIE, DASS NERVE-REIZUNG ODER MUSKULÄRE REAKTION MIT EINER ERHÖHTEN HAUTEMPFFINDLICHKEIT UND REIZUNG VERBUNDEN KÖNNEN. SETZEN SIE DIE THERAPIE FORT, BIS DIE GENAUE URSACHE DES PROBLEMS FESTGESTELLT WERDEN KANN.**

---

VORSICHT Cold Capsule® Einsätze sollten nicht die Haare oder die Haut eines Tieres verbrennen. Eine direkte Anwendung einer nicht beschichteten Kälte / Wärmepackung direkt auf die menschliche Haut wird jedoch nicht empfohlen. Akzeptable und empfohlene Anwendung für den menschlichen Gebrauch erfolgt über einem dünnen Verband. Cold Capsule® Einsätze bestehen aus einer ungiftigen Formel und sind nicht für den internen Gebrauch oder Verbrauch bestimmt.

---

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE, DASS VERLETZUNGEN MIT DIESEM PRODUKT VERMEIDET WERDEN.





If You Like Us ... Let Us Know




we love seeing our  
products in action

tag us on social media



IceHorseEquine

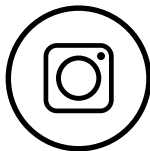

@Icehorse



IceHorseEquine



IceHorseNetwork

icehorse.com

R277667



E/CB

800-786-6633